



Remplacement du panneau avant de l'unité patient d'un respirateur artificiel Servo-i

Comment ouvrir et démonter l'unité patient pour des raisons de maintenance et d'entretien.


Rédigé par: Jeff Suovanen



INTRODUCTION


L'entretien des composants internes de l'unité nécessite d'abord d'enlever le panneau avant.

Étape 1 — Panneau avant de l'unité patient

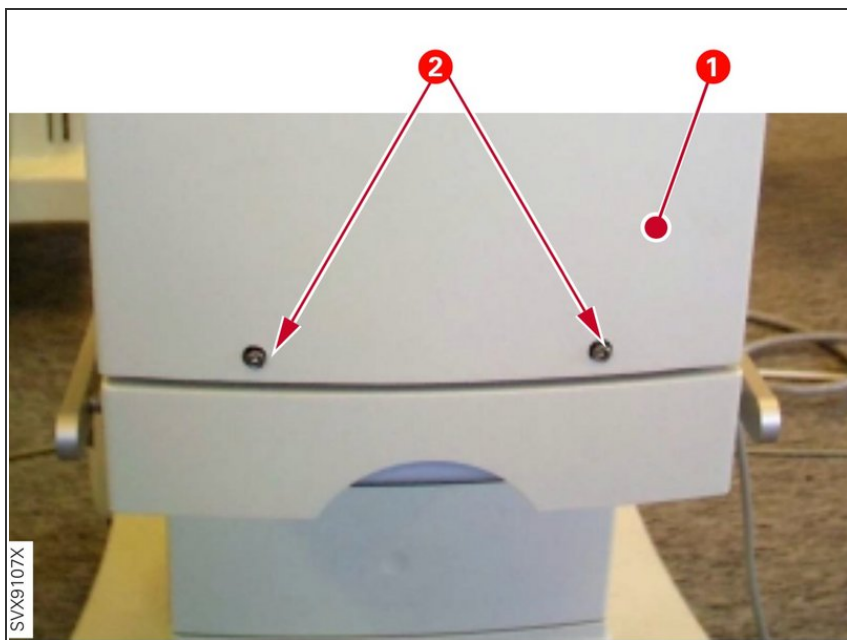

- Retirez les deux vis (2) qui retiennent le panneau avant (1).

Étape 2

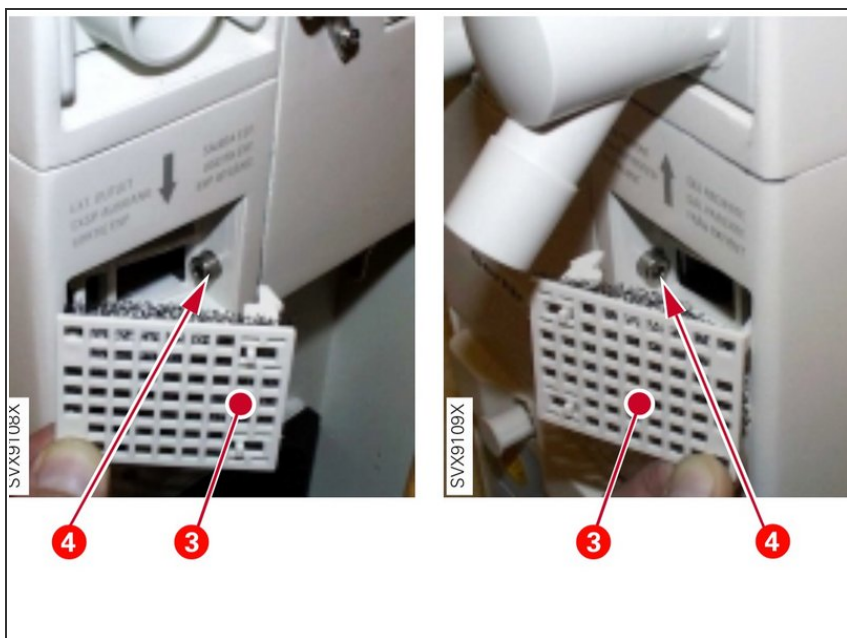

- (3) Retirez les deux grilles d'aération.
- (4) Dévissez une vis sous chaque grille d'aération (deux vis au total).

Étape 3



- Soulevez et retirez le panneau avant de l'unité patient.

Pour remonter l'appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.